

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО А01
инструкция по эксплуатации

Производитель: ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH
PRODUCT CO., LTD

Торговая марка: Irest

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ



Благодарим Вас за покупку данного изделия. Перед его эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Пожалуйста, обратите особое внимание на некоторые важные правила техники безопасности и при работе следуйте указаниям. Примечание: Наша компания сохраняет за собой право изменять дизайн изделия без дальнейшего дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по безопасности и уходу	02
Наименования и функции компонентов	04
Функции и эффект	05
Инструкция по эксплуатации	06
Технические характеристики изделия	08

Инструкции по безопасности и уходу

1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не позволяйте детям трогать подвижные части массажного кресла.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в инструкции и что прибор заземлен.
- Отключайте кресло от розетки после его использования и перед чисткой.
- При использовании кресла соблюдайте указания, данные в инструкции.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
- Не используйте кресло вне помещения.
- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
- Используйте кресло только по его прямому назначению.
- Рекомендуется использовать кресло не более 15 минут.
- Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
- Не используйте кресло, если вентиляционные отверстия заблокированы.
- Не роняйте никакие предметы на кресло.
- Не спите в кресле во время его работы.
- Не используйте кресло в состоянии алкогольного опьянения или если плохо себя чувствуете.
- Используйте кресло не раньше, чем через час после приема пищи.
- Во избежание травм не используйте слишком интенсивные режимы массажа.

2. Окружающая среда

- Не используйте кресло в помещениях с повышенной температурой или влажностью.
- Если температура в помещении резко меняется, не используйте немедленно.
- Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли и газов.
- Не используйте кресло в помещениях, где недостаточно чистота или плохая вентиляция.

3. Не рекомендуется использование массажного кресла:

- Людям, страдающим остеопорозом.
- Людям, с пороком сердца или людям, носящим кардиостимулятор.
- Людям с высокой температурой.
- Беременным женщинам или женщинам в период менструации.
- Людям, имеющим травмы или кожные заболевания.

Инструкции по безопасности и уходу

- Детям в возрасте младше двенадцати лет.
- Людям, которым прописан покой или людям, которые плохо себя чувствуют.
- Нельзя использовать кресло, если тело мокрое.
- Людям, чувствительным к высокой температуре.

4 Безопасность

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному производителем для данного изделия.
- Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.
- Не допускайте попадания воды во внутрь массажного кресла во избежание получения удара электротоком и повреждения прибора.
- Не допускайте повреждения проводов.
- Не используйте мокрую ткань для чистки электрических частей кресла, таких как выключатели или вилка.
- Если вы заметили какие-либо неполадки в работе кресла, отключите его от питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если вы почувствовали себя плохо, прекратите использование массажного кресла и обратитесь к врачу.


5. Техническое обслуживание

- Ремонт и тех. обслуживание данного изделия должны осуществлять квалифицированные специалисты. Пользователю запрещается самостоятельно разбирать и производить ремонт кресла.
- Не забывайте отключать кресло от питания после его использования.
- Не подключайте прибор к розеткам, которые не прилегают плотно к стене.
- Если массажное кресло долгое время не используется, смотайте провода и поместите его в сухое непыльное помещение.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей и не ставьте близко к открытым источникам огня.
- Для чистки кресла используйте сухую ткань. Не используйте растворители, бензин или спирт.
- Механические части кресла не требуют особого ухода.
- Не втыкайте в обивку кресла острые предметы.
- Не передвигайте кресло по неровной поверхности пола, чтобы его переместить, его следует приподнять.
- Делайте перерывы в работе кресла, не используйте его непрерывно в течение долгого периода времени.


6 Устранение некоторых неисправностей

- Небольшой шум является нормой при обычной работе массажного кресла.
- Если пульт управления работает некорректно, убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и выключатель находится в положении On (вкл.).
- Если номинальное рабочее время заканчивается кресло автоматически отключается. Если после долгой непрерывной работы кресло отключается автоматически, его следует включить не раньше, чем через пол часа.

Наименования и функции компонентов

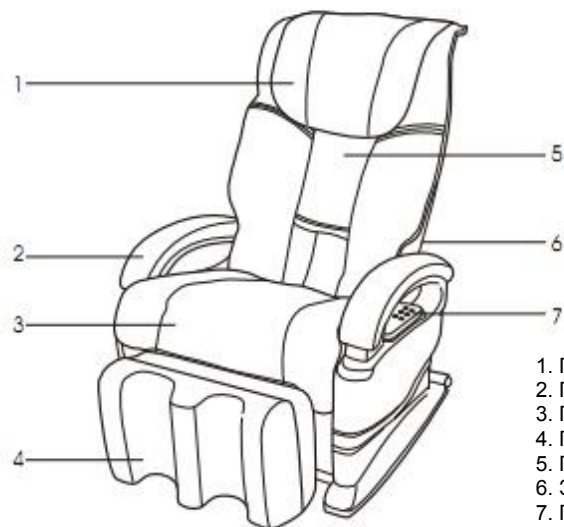

1. Подушка для головы
2. Подлокотник
3. Подушка для сидения
4. Подставка для ног
5. Покрывало спинки
6. Задняя крышка
7. Пульт управления
8. вентилятор
9. Выключатель питания
10. Блок предохранителей
11. Шнур питания
12. Штепсельная вилка
13. Колёсики

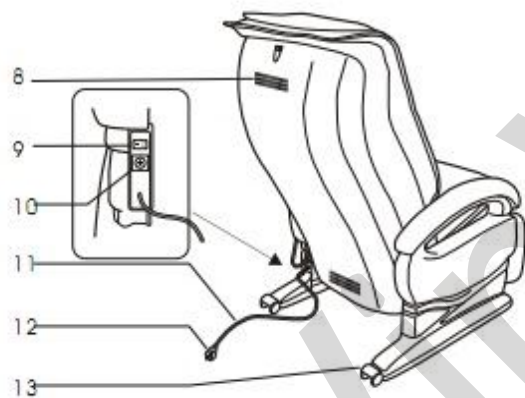

Функции и эффект

Функции и эффективность

- Кресло оснащено двумя массажными механизмами для массажа плеч, спины и поясницы.
- Кресло имеет три режима скорости и три функции массажа: автоматический, по часовой стрелке и против часовой.
- Кресло имеет трёхскоростную функцию вибрационного массажа ягодиц.
- Кресло оснащено постукивающей трёхскоростной функцией с семью автоматически сменяющимися режимами для массажа области бедер.
- Кресло оснащено разминающей функцией для массажа икр. Функция имеет три уровня интенсивности.
- Подставку для ног можно поднимать отдельно или вместе со спинкой кресла.

Эффективность.

- Снятие усталости.
- Улучшение кровообращения.
- Снижение усталости мышц.
- Расслабление напряженных мышц.
- Облегчение болей.
- Облегчение болей в мышцах.

Инструкция по эксплуатации

1. Использование пульта управления

- Чтобы запустить или остановить общий массаж

POWER: для начала общего и автоматического массажа, при нажатии любой функциональной кнопки, появляется индикатор выбора массажа, включающий массаж шеи, плеч, спины, поясницы, ягодиц, бедер и икр.

AUTO: Если кресло находится в режиме ручного управления, оно переходит в автоматический режим.

STOP: для прекращения массажа. Кресло переходит в выключенное состояние, индикатор при этом также выключается.

- Массаж шеи и плеч

NECK-SHOULDER: для начала массажа шеи и плеч. Режим имеет четыре варианта: автоматический, по часовой стрелке, против часовой стрелки и режим остановки.

SPEED: для выбора скорости: медленная, средняя, быстрая. Функция недоступна во время работы автоматического режима.

- Массаж спины и поясницы

BACK-Waist: для запуска массажа спины и поясницы. Функция имеет четыре режима: автоматический, по часовой стрелке, против часовой стрелки и режим остановки.

SPEED: для выбора скорости: медленная, средняя, быстрая. Функция недоступна во время работы автоматического режима.

- Массаж ягодиц

BUTTOCKS: для начала вибрационного массажа ягодиц.

INTENSITY: для выбора интенсивности: слабая, средняя и сильная.

- Простукивающий массаж бедер

THIGH: для начала простукивающего массажа бедер.

INTENSITY: для выбора интенсивности: слабая, средняя и сильная.

- Массаж икр

CALF: для начала массажа икр.

SPEED: для выбора скорости: медленная, средняя, быстрая.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Изменение положения подставки для ног

ПОДЪЁМ: нажмите кнопку указателя вверх для медленного подъёма подставки для ног; для остановки отпустите кнопку.


Инструкция по эксплуатации

Когда подставка для ног достигнет максимально высокого положения, кнопка начнёт светиться.

СПУСК: Нажмите кнопку указателя вниз для медленного спуска подставки для ног; для остановки отпустите кнопку. Когда подставка для ног достигнет максимально низкого положения, кнопка начнёт светиться.

- Изменение положения спинки кресла
ПОДЪЁМ: нажмите кнопку указателя вверх для медленного подъёма спинки; для остановки отпустите кнопку. Когда спинка достигнет максимально высокого положения, кнопка начнёт светиться.


СПУСК: Нажмите кнопку указателя вниз для медленного спуска спинки кресла; для остановки отпустите кнопку. Когда спинка кресла достигнет максимально низкого положения, кнопка начнёт светиться.

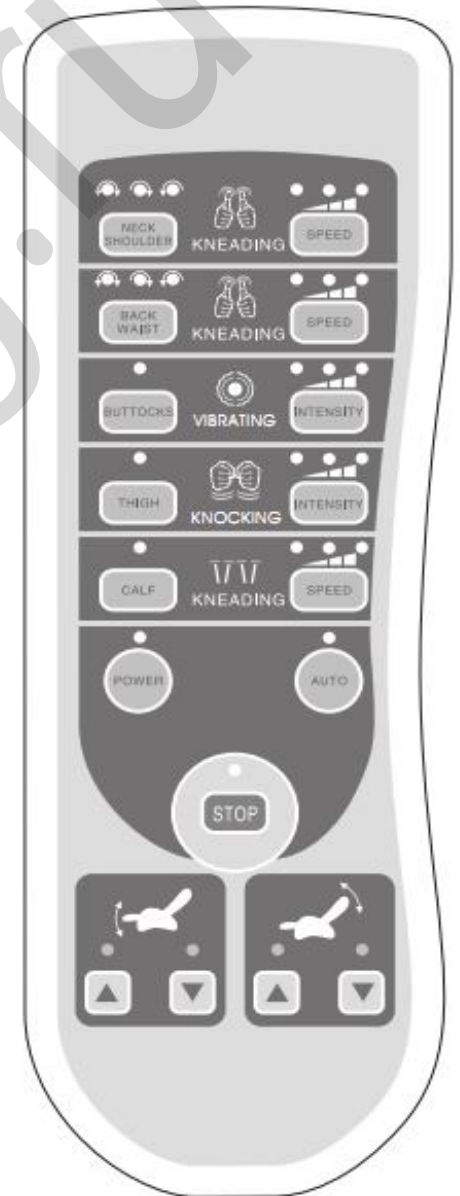

Инструкция по эксплуатации

2. Перед началом работы кресла откиньте его спинку.

Тяните её вверх до касания с замком и характерного звука блокировки. Вернуть спинку в исходное состояние можно наступив на замок, для разблокировки.

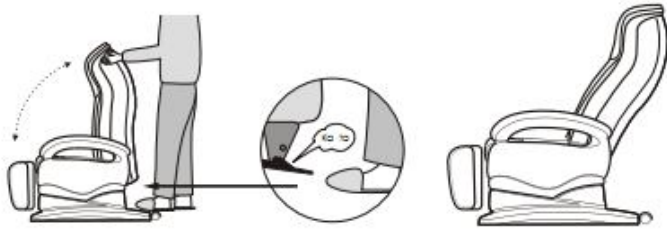

3. Инструкция по съёму подушек.

Использование подушки может уменьшить интенсивность массажа шеи и плеч, исходя из Ваших предпочтений, вы можете использовать её (рекомендуется) или убрать. Подушка спинки кресла соединена застежкой со спинкой, (1). Верхняя подушка и подушка спинки кресла также соединены застежкой. (2).

Внимание: использование массажного кресла запрещается в случае отсутствия подушки спинки кресла для того, чтобы избежать травм.



Технические характеристики изделия

Имя: Массажное кресло А01
Входное напряжение: 110-120В 50/60 Гц
220-240В 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт
Проектная безопасность: Тип I

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОРМУЛЯР

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ПРОДАВЕЦ (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
МОДЕЛЬ	
ПОКУПАТЕЛЬ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ДАТА ПОКУПКИ	Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Если в течение срока гарантии произошли какие-либо неполадки, кресло будет бесплатно отремонтировано при следующих условиях:

1. были поломанные детали при покупке кресла.
2. неисправность возникла при соблюдении всех инструкций, указанных в руководстве по эксплуатации (производитель не несет ответственности за поломку, возникшую в результате неправильного использования кресла).